

# TREATMENT TABLE

## for the McKenzie technique



*“Adjustable en hauteur avec la flexion et l'extension with flexion and extension au toucher de la pédale*

*Hill Laboratories Company, en collaboration avec Wayne Rath P.T., a développé la table de traitement mécanique Rath à hauteur réglable spécialement pour une utilisation avec la technique bien connue de McKenzie. de votre patient facile avec un contact de la pédale électrique. Les mouvements de la table peuvent également être directement contrôlés par le patient grâce à un commutateur manuel pratique de 12 volts qui se fixe parfaitement sous le dessus de table lorsqu'il n'est pas utilisé.*

*Une pédale à bascule permet au Rath Mechanical d'être réglé en hauteur de 22 à 35 pouces de chaque côté de la table, offrant ainsi une hauteur de travail idéale mobilisation, thérapie et examens. Les largeurs vont de 24 "à 27" et 30 ". La base télescopique adurable renferme toutes les pièces mécaniques en toute sécurité. La table de traitement mécanique Rath offre une garantie d'un an sur toutes les pièces et la main-d'œuvre.*


### Extension Position



### Flexion Position




*Le Rath Mechanical effectue un positionnement en flexion ou en extension*

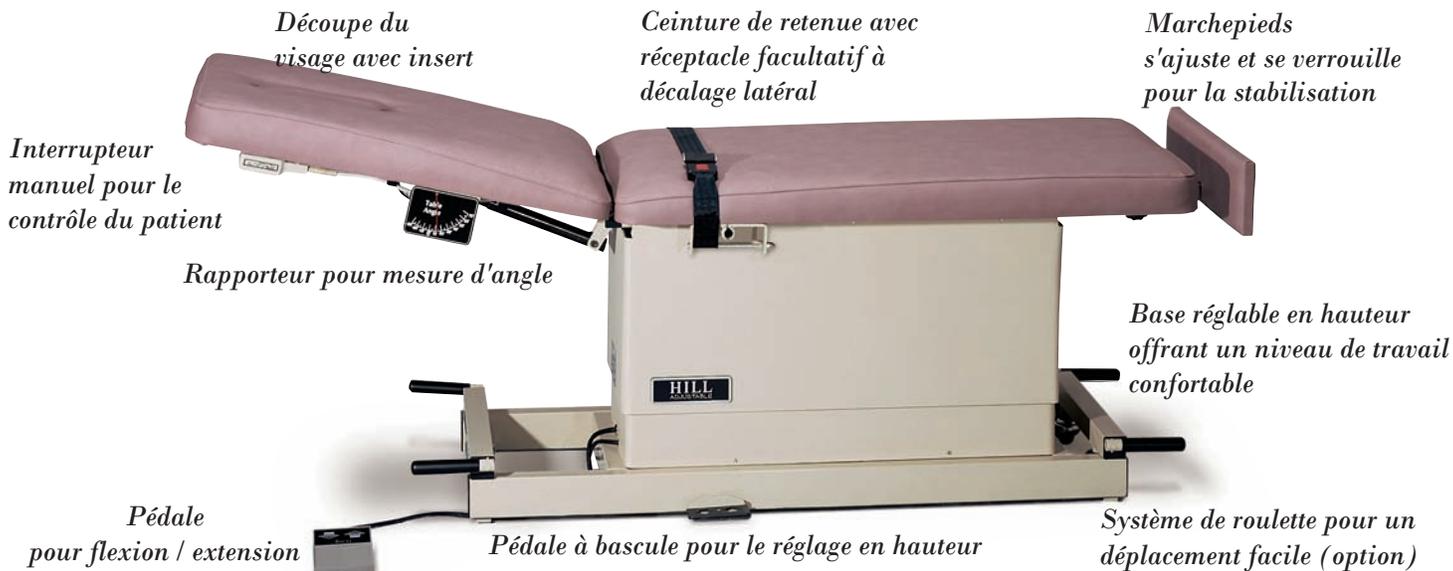


## The Lateral Shift Device

OPTION SPECIALE

*L'accessoire de décalage latéral de la table de traitement mécanique Rath permet au clinicien de maintenir une position de glissement latéral de la colonne lombaire tout en explorant l'effet de procédures d'extension prolongées et / ou répétées passives. La réponse du patient est surveillée de près, à la recherche de la centralisation ou de la périphérie des signes et des symptômes. Le levier de vitesses peut être bénéfique dans la prise en charge du patient avec un décalage latéral pertinent ou un compartiment latéral qui est incapable d'obtenir un bénéfice complet avec des forces auto-générées.*

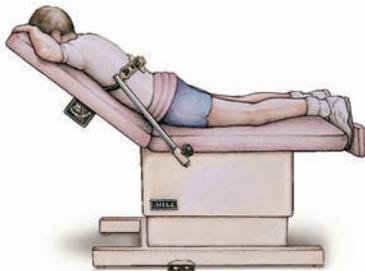

*Ces procédures ne doivent être utilisées après que le clinicien ai reçu une formation appropriée en Diagnostic mécanique et Thérapie de la colonne lombaire.*

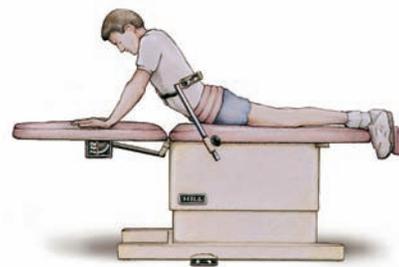

## Specifications

- S'élève du plus bas au plus élevé en 16 secondes • Base en thermoplastique beige ou grise • Longueur de la table - 76 po
- Ultra-Cell Foam™ de 2" d'épaisseur pour plus de confort et de maintien de la forme
- Rembourrage en vinyle durable dans un choix de 20 couleurs
- Capacité de levage - 500 livres • Alimentation électrique requise - 220 volts, ...
- Interrupteur à main 12 volts • Garantie d'un an sur pièces et main d'oeuvre

**ForscoLabs**  
Exclusive Distributor - HILL Laboratories

149 avenue du Maine 75014 Paris, France  
Tel: +33 1 83 597 160 - Fax: +33 1 972 447 924  
contact@forscolabs.fr • www.forscolabs.fr